



Bandage Repose Poignet Nocturne Futuro™

NIVEAU DE SUPPORT: MODERE - STABILISANT

Réveillez-vous avec le sentiment d'être reposé(e) et partez à la conquête de la journée avec le bandage FUTURO™ Repose Poignet Nocturne. Grâce au stabilisateur palmaire réglable et au coussin à billes, votre main garde une position idéale, ce qui atténue les symptômes liés au syndrome du canal carpien, au retrait d'un plâtre ou à l'arthrite. Cette orthèse pour poignet est solide et vous garantit une nuit reposante, en tout confort - et une matinée radieuse !

INDICATIONS:


- ▶ Tunnel carpien
- ▶ Postopératoire
- ▶ Arthrite

Caractéristiques spécifiques:

Coussin thérapeutique à billes, stabilisateur adaptable et amovible, texture respirante anti-humidité, matière souple pour un poignet relâché toute la nuit.

Autres caractéristiques et avantages:

- ▶ Protection et aide à la stabilisation modérées
- ▶ Associe soutien et contention légère grâce à un coussin renfermant des billes et à un stabilisateur palmaire amovible
- ▶ Éléments élastiques ajustables pour un confort et un soutien sur mesure
- ▶ Texture souple, facile à mettre et à enlever
- ▶ Conçu pour poignet droit ou gauche

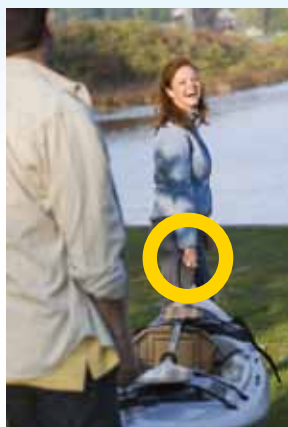

Mode d'emploi




Ouvrir les fixations. Glisser la main dans l'attelle en maintenant la baleine de renfort métallique le long de la paume de la main.



Refermer d'abord l'attache centrale puis les attaches voisines. Régler toutes les attaches afin d'obtenir une contention ferme mais confortable. Répartir les billes relaxantes sur toute la surface de la paume, jusqu'à la base des doigts, afin d'obtenir une position neutre de la main.

Tailles et informations de commande (mesurer la taille comme illustré)

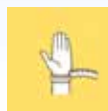

Dimensions	Taille	N° d'article	Code Pharmacie	EAN Code
Réglable 13,3 - 22,9cm	Réglable	48462DAB	CNK 2833-911	4 046719 509652

Matériau

Mousse polyuréthane, polyester, nylon, billes de styrène, spandex

Instructions de nettoyage pour les bandages FUTURO™

Lavage à la main jusqu'à 30 °C



L'utilisation d'eau de javel, le séchage en séchoir, le repassage et le nettoyage à sec sont à proscrire



Notre panel d'ingénieurs et d'experts médicaux apportent des technologies innovantes à chaque produit que nous développons.

www.Futuro.be